

⚠️ WARNINGS ⚠️

WARNING: Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.

WARNING: If you experience, or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.

WARNING: This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.

CAUTION: Follow application and care process described in instructions.

CAUTION: For single patient use only.

⚠️ ADVERTENCIAS ⚠️

ADVERTENCIA: Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.

ADVERTENCIA: Si usted experimenta, o tienen aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.

ADVERTENCIA: Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre el nivel seguro y apropiado de actividad mientras esté usando este dispositivo.

PRECAUCIÓN: Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.

PRECAUCIÓN: Para uso en un solo paciente.

⚠️ AVERTISSEMENTS ⚠️

ATTENTION: Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.

ATTENTION: En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

ATTENTION: Cet appareil ne peut ni prévenir ni réduire toutes les blessures. La réadaptation et les changements aux activités sont aussi essentielles à un programme de traitement sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé pour établir le niveau approprié d'activité avec cet appareil.

MISE EN GARDE: Suivez le mode d'utilisation et d'entretien décrit dans ce guide.

MISE EN GARDE: À utiliser pour un seul patient.



Lateral Stabilizer Instructions for Use

Estabilizador lateral Instrucciones de uso

Stabilisateur latéral Mode d'utilisation



2382 Faraday Avenue, Suite 300
Carlsbad, CA 92008 USA

Toll Free Tel: 1-800-321-0607

Local: +1-760-795-5440

Fax: +1-760-795-5295

www.breg.com

© 2023 Breg, Inc. All rights reserved.




EC REP

E/U authorized representative
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany



LATERAL STABILIZER

1

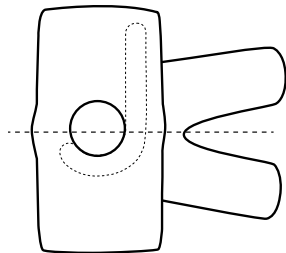

1. Apply Knee Sleeve

Grasp edges of the sleeve at the larger opening. Step through sleeve, pulling it up to the knee so the opening is centered on the knee cap.

*Example illustrates left leg application.

1. Colocar la rodillera

Tomar los bordes de la rodillera por la abertura más grande. Pasar la pierna a través de la rodillera, jalándola hasta la rodilla de modo que la abertura quede centrada con respecto a la rótula.


*El ejemplo ilustra la colocación en la pierna izquierda.

1. Posez la genouillère

Saisissez les bords du manchon par la plus grande ouverture. Passez la jambe par le manchon, en tirant vers le haut jusqu'à ce que l'ouverture pour le genou soit au centre de la rotule.

*Illustration pour la jambe gauche.

2

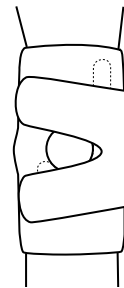

2. Secure Straps

First pull lower strap to attach, then pull upper strap to attach. Fit should be snug, but not too tight as to restrict circulation.

2. Asegurar las correas

Primero tirar de la correa inferior para ajustarla, luego tirar de la correa superior para ajustarla. El ajuste debe ser apretado, pero no demasiado ajustado como para restringir la circulación.

2. Attache des sangles

Tirez sur les sangles pour les fixer, en commençant par celle du bas. Ajustez correctement, sans trop serrer pour éviter de restreindre la circulation.

Material: Neoprene or AirMesh®

CARE & WASHING INSTRUCTIONS

Hand wash in cold water with a mild detergent, rinse and lay flat to air dry.



Material: neopreno o AirMesh®

LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y LAVADO

Lave a mano en agua fría con un detergente suave, enjuáguelo y póngalo en posición plana para que se seque al aire.



Matériau : néoprène ou AirMesh®

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE LAVAGE

Laver à la main dans de l'eau froide avec un savon doux. Rincer et sécher à plat.



If any serious incident has occurred in relation to the device, report to Breg and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Si se produce un incidente grave debido a este dispositivo, informe a Breg y a la autoridad competente del Estado miembro donde esté establecido el usuario o el paciente.

Si un incident grave survient avec le dispositif, signalez-le à Breg et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur ou le patient est situé.