

DEUTSCHE ANLEITUNGEN

⚠️ WARNHINWEISE

WARNUNG: VOR DER NUTZUNG DER ORTHESE DIE ANLEITUNG ZUR KORREKTEN ANLEGUNG UND DIE WARNHINWEISE SORGFÄLTIG LESEN. BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, UM EINE ORDNUNGSGEMÄSSE FUNKTIONSWEISE DER ORTHESE SICHERZUSTELLEN.

WARNUNG: WENDEN SIE SICH UMGEHEND AN IHREN ARZT/THERAPEUTEN, FALLS BEI IHNEN BEI DER ANWENDUNG DIESES PRODUKTS VERMEHRTE SCHMERZEN, SCHWELLUNGEN, HAUTREIZUNGEN ODER ANDERE UNGEWÖHNLICHE REAKTIONEN AUFTRETEN.

WARNUNG: DIESE ORTHESE VERHINDERT ODER REDUZIERT NICHT ALLE MÖGLICHEN VERLETZUNGEN. EINE ANGEMESSENE REHABILITATION UND ÄNDERUNG DER AKTIVITÄTEN SIND EBENFALLS BESTANDTEIL EINES SICHEREN BEHANDLUNGSPROGRAMMS. WENDEN SIE SICH BEZÜGLICH EINES SICHEREN UND ANGEMESSENEN AKTIVITÄTSGRADS WÄHREND DER ANWENDUNG DIESER VORRICHTUNG AN IHREN QUALIFIZIERTEN ARZT/THERAPEUTEN.

ACHTUNG: BEFOLGEN SIE DAS IN DEN ANLEITUNGEN BESCHRIEBENEN ANWENDUNGS- UND BEHANDLUNGSVERFAHREN.

ACHTUNG: NUR ZUM GEBRAUCH BEI EINEM PATIENTEN.

Schwerwiegende Vorfälle in Bezug auf das Produkt sind Breg und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist, zu melden.

A. Bitte wählen Sie die richtige Größe aus, da es die Halsorthese in verschiedenen Höhen und Umfängen gibt. Legen Sie die Rückseite der Halsorthese am Nacken des Patienten an. Höhe: Messen Sie die Unterseite des Kinns bis zur Oberseite des Brustbeins.

B. Legen Sie die vordere Hälfte Halsorthese an, wobei das Kinn in der Aussparung gesichert wird. Zentrieren Sie die Halsorthese, um eine neutrale Ausrichtung zu gewährleisten. Die vordere Hälfte überlappt die hintere Hälfte.

C. Ziehen Sie die Halsorthese mit den Klettverschlüssen mit beidseitigen Einstellungen fest. Zentrieren Sie die Halsorthese so, dass der Pfeil nach oben zeigt. Passen Sie die Orthese bei Bedarf an.


PFLEGE- UND WASCHANLEITUNGEN

Klettverschlüsse befestigen. Von Hand in kaltem Wasser mit mildem Waschmittel waschen, abspülen und flach liegend an der Luft trocknen lassen.



HINWEIS FÜR ANWENDER

Schwerwiegende Vorfälle in Bezug auf das Produkt sind Breg und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist, zu melden.

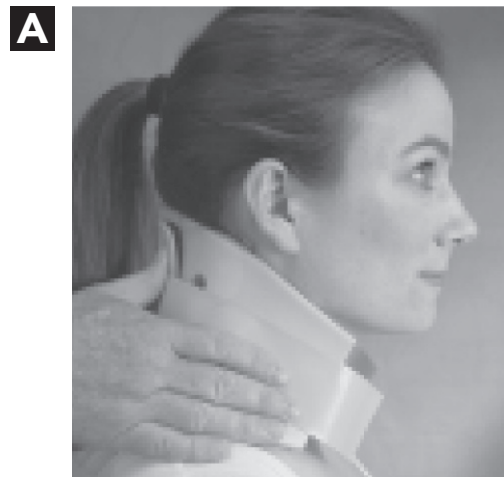

Cervical Collar with Open Trachea

FITTING INSTRUCTIONS

SWEDISH

DANISH

FINNISH

NORWEGIAN

ROMANIAN

DUTCH

POLISH

ITALIAN

GERMAN



Breg, Inc.
2382 Faraday Avenue, Suite 300
Carlsbad, CA 92008 U.S.A.

P: 800-321-0607

F: 800-329-2734

www.breg.com

© 2023, Inc. All rights reserved.

AW-1.04085 Rev B 08/23



E/U authorized
representative
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

